

saniswiss

saniject seringue indolore intelligente
même pas peur !



sans douleur système breveté
saniswiss SPI **légère** application sans effort et confortable pour le praticien
enfants c'est la seringue manquante pour petits et grands **automatique**
une pression sur le levier pour une dose précise **usage unique** idéal pour les patients à risque **ergonomique** compact pour un accès facile en bouche **hi-tech** un système d'injection révolutionnaire

Saniswiss a mis au point un système d'injection révolutionnaire permettant des anesthésies sans douleur. saniject™ est une petite seringue légère destinée à toutes les anesthésies locales y compris les plus douloureuses: intra-ligamentaires, intra-septales, para-apicales, palatines. Aucune technique d'anesthésie n'est requise, c'est « la seringue manquante » à vos seringues classiques. Livrée en kit, saniject™ s'assemble en quelques secondes.

saniject





seringue indolore intelligente !

sans douleur Sur le principe des seringues électroniques, le brevet **saniswiss™ SPI « Soft Pressure Injection »** permet une diffusion douce et indolore dans les tissus. Le patient ne ressent plus la douleur de l'infiltration. Un confort inestimable lorsque l'on sait que l'anesthésie est la principale crainte des patients.

pour les enfants Particulièrement appréciée par les enfants et les personnes anxieuses effrayées par les seringues traditionnelles, saniject™ effectue une anesthésie non-traumatisante et évite les contaminations croisées lors du traitement de patients à risque, en raison de sa conception à usage unique.

intelligente La pression ne s'applique pas à saniject™ car la seringue ne contrôle pas la pression mais le débit d'anesthésique. Constituée de pièces plastiques, certaines d'entre elles se contractent comme un amortisseur et se détendent selon la vitesse d'absorption du tissu, prévenant toutes douleurs pour le patient ou possible nécrose des tissus.

automatique

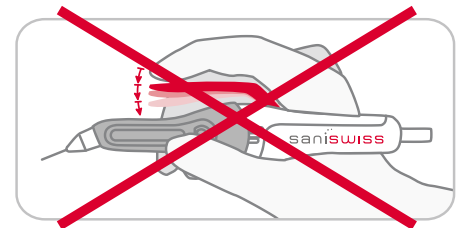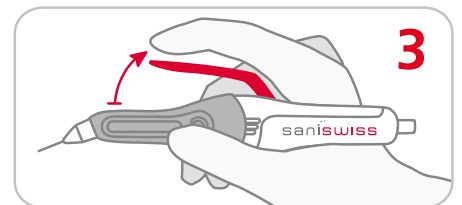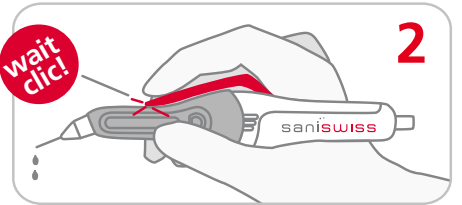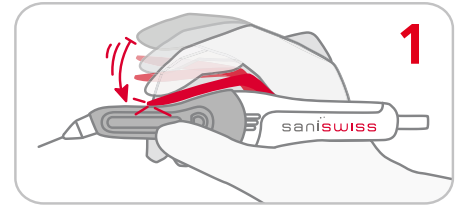

Un « clic » sonore indique au praticien le début et la fin de l'anesthésie, max. 6 secondes entre deux « clics » selon la résistance des tissus. Une simple pression sur le levier rouge et le mécanisme auto-doseur injecte une dose (0,06ml) d'anesthésique sans pression. Le praticien n'a plus rien à contrôler l'anesthésie est automatique.


saniject™ est protégé par des brevets et autres brevets en cours.

P_a pression

t temps

douleur

seringue traditionnelle

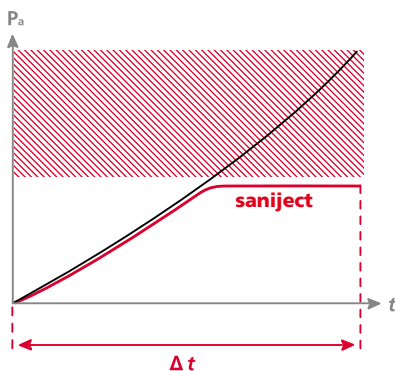

idéal pour les enfants

saniject™ kit seringue

carton de 25 saniject™
code 112017

